



 **BAUERFEIND®**

MOTION IS LIFE.

パウアーファインド社… 1929年ドイツ創業の医療機器メーカー
世界で初めて医療用コンプレッションソックスの量産化に成功
2010年よりオリンピック・パラリンピックの公式サプライヤーを務める。

パウアーファインド社の製品の特徴

【サポーター】

関節のアナトミカルな形状にあわせてフラットニットで編まれたニット素材とシリコンパッドが、関節周辺部に適度なコンプレッションをくわえることで、身体の内なるテンセグリティ（張力統合）構造を再現し、固有受容覚の再生と増進を促し、関節周辺部を安定させます。

筋収縮にあわせて伸縮することで、運動時の筋肉の動きを阻害せず、動きやすさと安定化を両立させます。

ニット素材のため通気性に優れ、適切なサイズを選択することでスレにくいことも大きな特徴です。

【コンプレッションソックス】

1929年の創業から培われたノウハウが詰め込まれたコンプレッションソックスは、単純に段階的に圧力を変えているのではなく、筋肉や部位に応じてニッティングパターンを複雑に切り替え組み合わせることで、筋活動を抑制し、エネルギーを詰めパフォーマンス向上へ導きます。

【インソール】

足は2本の縦アーチに加え、横アーチで構成されています。このアーチ構造は足から膝関節・腰などへの負担を軽減するクッションの役割を果たしています。アーチの構造をしっかりと支えるためには、縦アーチを支えるだけでは不十分で、横アーチもしっかり支える必要があります。

パウアーファインドのインソールは横アーチを支えるための「メタパッド」を標準搭載しており、足底を全面接地させることができますので、走る時の廻り返しやターンをするときの踏ん張りがしっかり利くようになります。

また中足部の足底には固有受容器が多く集まっていると考えられ、荷重によるコンプレッションを加える事で固有受容覚の再生と増進を促し、パフォーマンスを向上させることができます。





 **BAUERFEIND**[®]

Since 1929

NEW エピTrain

テニス・ゴルフ・野球などの
スポーツから日常でのひじのお悩みに



- ニット素材の変更により、通気性と軽量化が20%アップ
- ひじの内側にはより柔らかい素材を使用。曲げた時の不快感を軽減。
- 上腕部の長さが長くなり、サポート力がアップ
- ひじの形状に沿ったシリコンパッドが関節を安定化。
- シリコンパッド内部にプラスチック製のドットを設け、腫が集まる部位により効率的に圧迫。
- 筋繊維に沿ったドットが前腕部をしっかりサポート。

NEW

RUN ULTRA LIGHT SOCKS

「ランウルトラライトソックス」

1929年創業以来のメディカルコンプレッション技術を応用し、ふくらはぎの筋振動を抑制するターゲットコンプレッション技術を採用。

足首とふくらはぎに最大着圧を2回持つことで、筋振動を抑制しエネルギーを蓄え、パフォーマンス向上へと導きます。

ラインナップはコンプレッションソックス、そしてパウアーファインド社としては初めて、ミッドカットソックスとローカットソックスを発表！

ミッドカットソックスは、足関節とアーチを安定させ、ローカットソックスは、アーチへの負担を効果的に軽減させます。



TARGETED COMPRESSION ZONE

エネルギーを促進し、より効率的に長く走るためのターゲットコンプレッション



TACHILLES COMFORT

アキレス腱の摩擦を軽減する形状



RELIEF SOLE

長時間の運動前に磨ける優れたソール



ULTRALIGHT KNIT

装着感を感じさせない快適なニット素材



INFINITY ZONE

足関節とアーチを安定させるための保護ゾーン



HEEL PROTECTION

着地時の衝撃を緩和



ARCH LIFT

アーチにかかる負担を効果的に軽減するアーチサポート



COMPRESSION SOCKS



MIDCUT SOCKS



LOWCUT SOCKS



ゲニューTrain



膝関節周辺部の不安感に全般的に使用できる膝サポーター。膝関節の立体形状をフラットニット製法で編み込み作り出し、適切なコンプレッションとシリコンパッドが膝関節の安定をもたらします。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥11,500(税別)



ゲニューTrain サイズ選択 ●と◎でサイズが異なる場合には、◎をも優先ください

サイズ	0	1	2	3	4	5	6
①大腿部周径 (cm)	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56
②下腿部周径 (cm)	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46

ゲニューTrain P3



ゲニューTrainと比較して上下に長く、コンプレッションも強く設定されています。膝蓋骨が外側にズレるのを防ぐためのストラップと太ももの外側に付属しているパッドが膝関節帯に作用します。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥17,600(税別)



ゲニューTrain P3 サイズ選択 ●と◎でサイズが異なる場合には、◎をも優先ください

サイズ	1	2	3	4	5	6
①大腿部周径 (cm)	39-42	42-45	45-48	48-51	51-54	54-57
②下腿部周径 (cm)	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46

*製品には欠・割がございます





ルンボTrain ルンボTrain Lady



腰椎部分に三角形のシリコンパッドを当てて適度な圧迫で靭性を高め、身体を内側から支え、骨盤を適切な位置へ導き膝の負担を軽減します。フラットでニット形状のため、衣類を身につけても目立ちにくく、運動時の動きを阻害せずスリません。

カラー：チタン

着脱・洗濯価格 ¥22,000(税別)



ルンボTrain / ルンボTrain Lady サイズ選択

サイズ	1	2	3	4	5	6
股径 (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

※ヘットの最下部の股間に装着

ミオTrain



左右両本のベルトで大股部の圧力を調整することができます。大きさの異なる2枚のシリコンパッドを自由に挿入でき、さらに圧迫を加えることも可能。ベルトとパッドは取り外しでき、ニットのみで使用できます。

カラー：チタン

着脱・洗濯価格 ¥22,000(税別)



ミオTrain サイズ選択 ●上●下でサイズ異なる場合には、●を必ず優先ください

サイズ	1	2	3	4	5	6	7
●上方股径 (cm)	44-48	48-52	52-56	56-60	60-64	64-68	68-72
●下方股径 (cm)	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53



マレオTrain

高さの違う外側と内側のくるぶしにあわせて配置されたシリコンパッドが装着時の圧力を均等化し、足関節を安定させます。さらに、コンプレッションによるアーチサポートも行います。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥9,800(税別)



マレオTrain S

∞字ストラップが付属しているため、より強力に足関節を安定させます。ストラップの位置や引っ張りの強さを調整することで、固定力を調整することも可能です。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥9,800(税別)



アキロTrain

アキレス腱全体を覆うシリコンパッドが周辺部を心地よく圧迫します。足底に設置されたウェッジがアキレス腱の過度な伸長を防ぐ役割を果たします。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥12,500(税別)



マレオTrain / マレオTrain S / アキロTrain サイズ選択

サイズ	1	2	3	4	5	6
両径 (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

※製品には色・サイズがあります
※足の幅や骨格に合わせサイズをお選びください



エピPoint



ストラップ内部に配置された、5Pointシリコンパッドが過剰な回旋による負荷をピンポイントでアプローチします。関節内部の力の伝達を効率化することで、負荷の軽減とパフォーマンスアップを同時に引き起こします。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥8,000(税別)



エピPoint サイズ選択

サイズ	1
周径 (cm)	22.5-33

※前腕の一巻太、股関節の周径を計測ください。

NEW エピTrain



肘の内側外側の両方に配置されたシリコンパッド (EPICON+PADS) が装着時に肘周辺部の筋肉や靭帯へ適切な圧や刺激を与え運動時や日常的な肘の安定感を与えます。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥10,000(税別)

エピTrain サイズ選択

サイズ	0	1	2	3	4	5	6
周径 (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	31-33	33-35

※前腕の一巻太、股関節の周径を計測ください。



マニユTrain



親指側、小指側両方のシリコーンパッドが圧力を均等化し、手首周辺部を安定させることができます。付属のステーとベルトで固定度合いを3段階に調整することが可能です。

カラー：チャタシ・男
希望小売価格 ¥13,000(税別)



マニユTrain サイズ選択

サイズ	1	2	3	4	5	6
周径 (cm)	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20

※手首の一番細い部分をご計測ください
※製品には高・着付のみです

オモTrain



装着した状態で運動することができ、関節可動域の大きい肩関節の動きを制限せずに安定させます。腰部にベルトをまわし、胸まわりを締めることで動きの制限をしません。

カラー：チャタシ
希望小売価格 ¥20,000(税別)



オモTrain サイズ選択

サイズ	0	1	2	3	4	5	6
周径 (cm)	20-22	22-24	24-26	26-29	29-32	32-36	36-40

※この製品の背中の一番深い部分をご計測ください



SPORTS COMPRESSION SOCKS RUN & WALK



部位ごとにニットイングパターンを複雑に切り替え組み合わせることで、つま先から踵下まで必要なコンプレッションが適切にかけられており、筋活動を抑制し、エネルギーを促進させることができます。

カラー：黒・白・リベラ
赤・黄・緑
型：ロング・ショート
希望小売価格 ¥7,800(税別)

※在庫なくなり次第終了

SPORTS COMPRESSION SOCKS BALL & RACKET



カラー：ハードコア/リベラ・ハードコア/ボーラー
シム/リベラ・シム/ボーラー
型：ロング・ショート

希望小売価格 ¥7,800(税別)

足関節に≡字状のテーピング部を設け、足関節を安定させるとともに、足底筋膜を支え、アーチサポートを行います。部位ごとにニットイングパターンを複雑に切り替え組み合わせることで、つま先から踵下まで必要なコンプレッションが適切にかけられており、筋活動を抑制し、エネルギーを促進させることができます。

SPORTS COMPRESSION SOCKS

サイズ選択



S	31~36
M	36~41
L	41~46
XL	46~51 (cm)



ショート	21.5~26.0
ロング	25.5~32.0 (cm)

① 足幅の一番太い部分を計測してください ② heelから足先までの実際の寸法を計測してください



NEW

RUN ULTRA LIGHT SOCKS



COMPRESSION SOCKS



MIDCUT SOCKS



LOWCUT SOCKS

【コンプレッションソックス】

ターゲットコンプレッションにより各部位を適切にサポート。
2nd MAXIにより足踵とふくらはぎ部分の着圧を強くさせ、筋活動の抑制し、
エネルギー蓄えパフォーマンス向上へ導きます。

【ミドルカット・ローカットソックス】

ターゲットコンプレッションにより各部位を適切にサポート。

カラー

MEN / 男・白・ネイビー WOMEN / 女・白・ベージュ

希望小売価格

コンプレッションソックス ¥6,800(税別)

ミッドカットソックス: ¥2,700(税別)

ローカットソックス: ¥2,500(税別)

サイズ

ローカット・ミッドカットは靴のサイズで選択

コンプレッションソックスは靴のサイズとふくらはぎの周径の指し合わせから選択

靴のサイズ

MEN	EU	38-40	41-43	44-46
	CM	24.0-25.5	26.0-27.5	28.0-29.5
WOMEN	EU	35-37	38-40	41-43
	CM	22.0-23.5	24.0-25.5	26.0-27.5

ふくらはぎの太さ— 適切な指し合わせの両径

共通	S	M	L	XL
	31-36	36-41	41-46	46-51



SPORTS インソールシリーズ



アーチ部の形状、ヒールカップの深さ、表面カバーの材質など、それぞれの競技に応じた構造が、運動時に適切なサポートを行います。薄くて軽量ながらもメタパッドを標準搭載し、横アーチを支え、足の指先までしっかり使用できる構造となっています。



ラン&ウォーク



ボール＆ラケット



スキー＆スケート

希望小売価格 ¥9,800(税込)

SPORTS INSOLE サイズ選択

サイズ	35	36	37	38	39	40	41
①全長(長さ) (cm)	21.5-22.5	22.5-23.5	23.0-24.0	23.0-24.5	24.0-25.0	24.5-26.0	25.0-26.5
②踵-メタパッド上端 (cm)	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0
サイズ	42	43	44	45	46	47	48
①全長(長さ) (cm)	26.0-27.0	27.0-28.0	27.5-28.5	28.5-29.5	29.0-30.0	30.0-31.0	31.0-32.0
②踵-メタパッド上端 (cm)	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5



メタパッド

- ①必ずかかとをおわび、指先までの足の実際の寸法を測ってサイズをお選びください
- ②メタパッドの位置を必ずお確かめください。前足部(MP関節)に干渉しないようにご注意ください



コンフォート スポーツ



硬さの異なるEVA素材を組み合わせ、組み合わせ方を変更することで、競技に応じた様々な方向を示し、サポート、衝撃吸収を行います。ThePowerWave[®]機構により、硬さの異なる境界部分であっても、スムーズに力の伝達を行なうことが可能。

メタパッドを標準装備しているため、横アーチを支え、足の裏を全周接地させることができ、パフォーマンスを向上させます。



ウォーク



コン



プレイ



ゴルフ

希望小売価格 ¥9,800(税込)

コンフォート スポーツ サイズ選択

サイズ	35	36	37	38	39	40	41
足底長さ (cm)	21.5-22.5	22.5-23.5	23.0-24.0	23.0-24.5	24.0-25.0	24.5-26.0	25.5-26.5
標準メタパッド上端 (cm)	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0
サイズ	42	43	44	45	46	47	48
足底長さ (cm)	26.0-27.0	27.0-28.0	27.5-28.5	28.5-29.5	29.0-30.0	30.0-31.0	31.0-32.0
標準メタパッド上端 (cm)	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5



メタパッド

- ①必ずかかとを合わせ、指先までの足の実際の寸法を測ってサイズをお確かめください
- ②メタパッドの位置を必ずお確かめください。前足部 (MP関節) に干渉しないようにご注意ください



Q ゲニューTrainのサイズについて
 太もも部分とふくらはぎ部分の計測でサイズが違う場合はどちらを優先すべきですか？

A 太もも部分とふくらはぎ部分の計測の値でサイズが違う場合はふくらはぎ部分の
 両径を優先してください。例えば太もも部分が46cm(サイズ3)ふくらはぎ部分が
 33cm(サイズ2)の場合はサイズ2を選択してください。
 サイズが違う場合、試し置かれることをおすすめします。

Q サイズが重なっている場合はどちらを選べばいいですか？

A 各製品により選択基準が変わりますが、基本的には下のサイズを選ぶことを
 推奨しています。生活様式、スポーツシーン、体型により異なってきますので、
 ご相談ください。また、履き比べてサイズを選択することをおすすめします。

Q タイツやスパッツ・靴下などの上から装着は可能ですか？

A 基本的には素肌の上への装着を推奨しております。タイツ等の上からの装着に
 ついては素材によってずれが生じ、パワアーファインドサポーターの効果十分に
 得られなくなってしまう可能性があります。また、サポーターの下にタイツ等を
 装着する場合は、しわが寄らないようにご注意ください。
 しわがあると、圧迫により皮膚へのトラブルや痛みがでる可能性があります。

Q ゲニューTrainとゲニューTrainP3の違いは何ですか？

A ゲニューTrainは膝関節周辺部の不安感に全般的に使用できるサポーターです。
 ゲニューTrainP3は全体的にコンプレッション(筋圧)値がゲニューTrainより
 高く設定されており、膝の外側(腓骨筋)や膝蓋骨の下(膝蓋靭帯)に
 大きな問題を抱えている方へおすすめします。

Q マレオTrainとマレオTrainS、アキロTrainの違いは何ですか？

A マレオTrainは足関節まわりのシリコンパッドがコンプレッションをかけることで、
 足関節を安定させます。マレオTrainSはシリコンパッドがない代わりに8の字の
 ストラップが付属しており、より強固に安定させることができます。
 ストラップの巻く位置を調整することで、足首の内反の制限を調整することも
 可能です。アキロTrainはアキレス腱に沿った長いパッドが踵やアキレス腱
 周辺部に作用します。

Q エビTrainとエビPointの違いを教えてください。

A エビTrainは肘の関節部の内側外側に配置されたシリコンパッドが肘の
 付け根の靭帯を圧迫します。エビPointはストラップの内部に配置された
 5つのシリコンドットがよりピンポイントで肘周辺部に作用します。
 ストラップを調整することで圧迫の度合いを調整することも可能です。

Q コンプレッションソックスは寝るときに履いてもいいですか？

A 就寝時は着用しないでください。脚が水平な状態でコンプレッションをかけると、心臓に過度な負荷をかける恐れがあります。運動時・日常生活時にご使用ください。

Q メタパッドとは何ですか？

A メタルザルパッドの跡で足底の3つのアーチを支えるために足裏のくぼみに収まるように配置されたパッドのことです。運動時のグリップを強化したり、足底を安定させる効果があります。

Q サポーターをしていると筋力がおちると聞いたのですが・・・

A ハードな支柱をもち、ベルトで締め付けるタイプのサポーターの場合、筋肉の動きを止めてしまうことで、筋力がおちてしまうことがあります。パワーファインドサポーターは筋肉の動きにあわせて伸縮するので、筋力がおちない構造となっています。

Q オールシーズン使用できますか？

A 使用可能です。ニット素材でできているため、通気性が良く、オールシーズン快適に装着することができます。

Q 日常生活でも使用できますか？

A 使用可能です。歩行や階段の上り下りなど日常生活動作にも有効に働きます。コンプレッションソックスなどは長時間の移動の際にも重宝します。

Q 水中でも使用できますか？

A 使用可能です。ただし使用後は必ず真水で洗濯してください。

Q コンプレッションが弱くなったような気がします。

A ご使用後、毎回お洗濯していますか？ニット繊維は洗濯をすることで、元の伸縮性を回復します。長期間のご使用の場合で、洗濯しても戻らない場合は買い替えをご検討ください。

Q 洗濯・お手入れ方法

A インソール以外の製品は洗濯機でネットに入れて洗濯可能です。乾燥機、天日干し、柔軟剤は使用しないでください。詳しくは次ページを参照ください。

Q パワーファインド製品を組み合わせて使えますか？

A 使用できます。パワーファインド製品は組み合わせて使用するほど効果を発揮します。ただし、コンプレッションソックスと足首サポーターの併用はコンプレッション(加压)が強くなりすぎる可能性があるのでスタッフへご相談ください。気になる場合は、ご試着を推奨します。



製品仕様とお手入れについて

サポーター

Train アクティブニット素材・ラテックス 補綴糸(ポリアクリル繊維)
 スター(プラスティック製または樹脂コーティングスチール)
 パッド(シリコン)

コンプレッションソックス

ポリアクリル繊維、ポリウレタン

お手入れの方法

- 洗濯は中性洗剤を使用し、30℃以下のお湯で行なってください。
- 洗濯機の場合はネットに入れて洗濯してください。
- ドライヤーやヒーターでは乾かして、日陰で自然乾燥させてください。
- ドライクリーニングは行わないでください。



洗濯機で洗う
30℃以下



洗濯ネット



ドライヤー



ヒーター



ドライクリーニング

インソール

ポリウレタン、EVA、塩化ビニル

お手入れの方法

- 使用後は必ず取り出し、湿気を外に逃がすようにお手入れをお願いします。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 足部との接触部分は中性洗剤を付けたスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残りやすいように、乾燥し込ませてください。
- ドライヤーやヒーターでは乾かさないで、日陰で自然乾燥させてください。
- ドライクリーニングは行わないでください。



洗濯機で洗う
30℃以下



洗濯ネット



ドライヤー



ヒーター



ドライクリーニング

Offizieller Partner von

オフィシャルパートナー



「ドイツ スポーツ財団」



「ドイツ 陸上競技連盟」



「オーストリア スキーチーム」



「アルバベルリン」バスケットボール ブンデスリーガ




「FCシャルケ」サッカー ブンデスリーガ



「THW KIEL」ハンドボール ブンデスリーガ

BAUERFEIND®

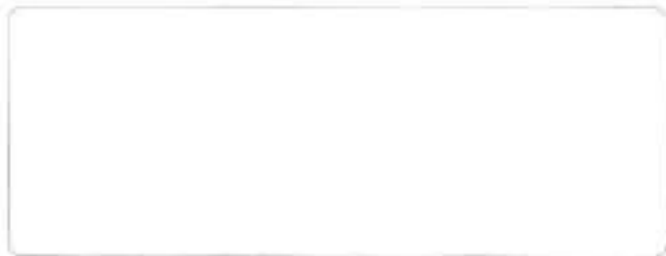

パウアーファインP社 日本正規代理店
パシフィックサプライ株式会社
〒574-0044 大阪府大東市御坊1-12-1
Tel: 072-875-8008
Fax: 072-875-8010
www.p-supply.co.jp

パウアーファインド



パウアーファインド オフィシャルサイト
<http://bauerfeind.p-supply.co.jp/>



Since 1929



facebook



Instagram



twitter